



IT Health



MANUAL TÉCNICO DE LA INTERFAZ APP_ADM_SIEMENS_VALIQC

Versión 1.0.0

Tabla de contenido

1	Control de cambio	2
2	Funcionalidad de la aplicación	3
	2.1 Detalles de la interfaz.	3
3	Requisitos mínimos de instalación	3
4	Contenido de la carpeta de la aplicación	3
5	Instalación	4
6	Explicación de los archivos de configuración	4
7	Configuración y homologación en la base de datos.....	5
	7.1 Identificadores de homologación	5
8	Imágenes de la interfaz	6
9	Recomendaciones	10



IT Health



ANNAR
Health Technologies

1 Control de cambio

FECHA DEL CAMBIO	DETALLE DEL CAMBIO
28/12/2023 Versión 1.0.0	SOP-14501, [Interfaz Aplicativo] [MEDERI] [VALIQC] - Desarrollo Interfaz valores ctrl calidad (ADM Siemens)

2 Funcionalidad de la aplicación

La interfaz APP_ADM_SIEMENS_VALIQC procesa los archivos planos que contienen los valores de control de calidad de ADM_SIEMENS y sube los resultados al esquema de base de datos definido para ValiQC.

2.1 Detalles de la interfaz.


- ❖ Unidireccional.
- ❖ Tipo de comunicación: Archivos planos.

3 Requisitos mínimos de instalación

- Sistema operativo, Windows 7 SP1 o superior, preferiblemente por temas de compatibilidad, (Windows 10 o Windows 11).
- Framework 4.8 (por temas de compatibilidad, los PC que tengan Windows 7 no permite actualizar a versión 4.8).
- Espacio mínimo disponible en Disco 10 GB.
- Memoria RAM 4 GB o superior.
- Procesador 2 GHz o superior.

4 Contenido de la carpeta de la aplicación

Carpeta: Interfaz APP_ADM_SIEMENS_VALIQC

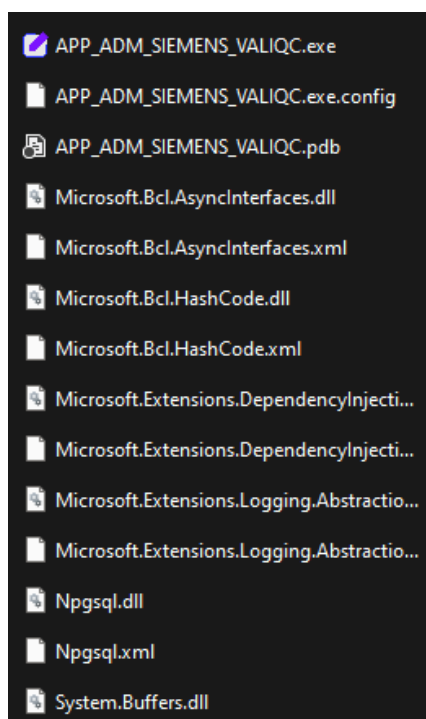



5 Instalación

- Si no se tiene Framework 4.8 instalado, se baja la aplicación y se procede a instalarla.
- Se copia la carpeta en el disco C: o D: no tiene restricciones de ubicación ni de nombre, ejemplo en C:\APP_ADM_SIEMENS_VALIQC
- Crear carpeta para el manejo de los LOGS de la aplicación; esta se puede crear en el disco C: o D:, no tiene restricciones de ubicación ni de nombre.

6 Explicación de los archivos de configuración

En cada carpeta hay un archivo de configuración, se explican a continuación la configuración de cada archivo.

Carpeta: APP_ADM_SIEMENS_VALIQC.exe.config

```
3 <appSettings>
4 <!--Configuración Interfaz-->
5 <add key="nombreEquipo" value="ADM_SIEMENS_QC" />
6 <add key="intervalo" value="1" />
7 <!-- Configuración Rutas archivos-->
8 <add key="rutaArchivos" value="D:\Archivos" />
9 <add key="rutaArchivosOK" value="D:\ArchivosOK" />
10 <add key="rutaArchivosError" value="D:\ArchivosERROR" />
11 <!--Configuración Log-->
12 <add key="activaLog" value="S" />
13 <add key="rutaLog" value="C:\logs" />
14 <add key="nombreLog" value="ADM_SIEMENS_VALIQC" />
15 <add key="imprimirQueryesDBLog" value="N" />
16 </appSettings>
17 <connectionStrings>
18 <!--Configuración Conexión a Base de Datos-->
19 <add name="intentosReconexionDB" connectionString="1" />
20 <add name="StrCadenaConeccion" connectionString="Server=190.60.122.167;Port=5432;Database=VIVAIA;User Id=postgres;Password=qxnk26yp;" providerName="Npgsql" />
21 </connectionStrings>
```

Línea 5 [nombreEquipo]: Se define el nombre del equipo con el que se realizara los procesos de homologación e inserción en el esquema de Veliqué en la base de datos, en este caso **ADM_SIEMENS_QC**, es importante que termine en [**_QC**] el nombre que se defina.

Línea 6 [intervalo]: Se define el intervalo de tiempo[en minutos] en los que la interfaz iniciará la búsqueda de archivos planos en la ruta definida en la línea 8.

Línea 8 [rutaArchivos]: Se define la ruta en la que se desean buscar los archivos planos a procesar.

Línea 9 [rutaArchivosOK]: Se define la ruta en la que se desean mover los archivos planos luego de ser procesados.

Línea 10 [rutaArchivosError]: Se define la ruta en la que se quiere que se guarden los archivos planos en los que se presentó algún tipo de error, este archivo plano solo contendrá las líneas que generaron los errores y el nuevo archivo generado conservara el nombre del archivo que se procesó más la etiqueta (**ERROR**).

Línea 12 [activaLog]: Se define si se desea que la interfaz genere los Logs de auditoría y soporte.

Línea 13 [rutaLog]: Se define la ruta de la carpeta para guardar los Log de auditoría y soporte.

Línea 14 [nombreLog]: Se define el nombre que tendrá el Log de auditoría y soporte.

Línea 15 [imprimirQueryesDBLog]: Se define en S = Si, N = No, para generar en el Log todas las queryes realizadas en los procesos de la interfaz.

Línea 19 [intentosReconexionDB]: Se define el numero de intentos de reconexión que hará la interfaz a la base de datos.

Línea 20 [StrCadenaConeccion]: Se define la cadena de conexión a la base de datos.



7 Configuración y homologación en la base de datos

- Configuración en la tabla de homologación

	equipo_cod character varying (20)	examen_cod character varying (60)	examen_cod_equipo character varying (50)	homologacion_cod [PK] bigint
1	ADM_SIEMENS_QC	2	ECre_U	2729
2	ADM_SIEMENS_QC	2	IP_U	2768
3	ADM_SIEMENS_QC	2	UN_U	2769
4	ADM_SIEMENS_QC	1	Alb	2770
5	ADM_SIEMENS_QC	1	ALT	2771
6	ADM_SIEMENS_QC	1	AST	2772

7.1 Identificadores de homologación

- equipo_cod** = Se configura el identificador de las homologaciones según el archivo de configuración de la interfaz, en este caso ADM_SIEMENS_QC.
- examen_cod** = Se configura el nivel máximo que tendrán los analitos de control de calidad.
- examen_cod_equipo** = Se coloca el analito que proviene de los archivos planos para control de calidad.
- homologacion** = Número consecutivo que maneja la tabla.




IT Health



ANNAR
Health Technologies

8 Imágenes de la interfaz

- Resultados:

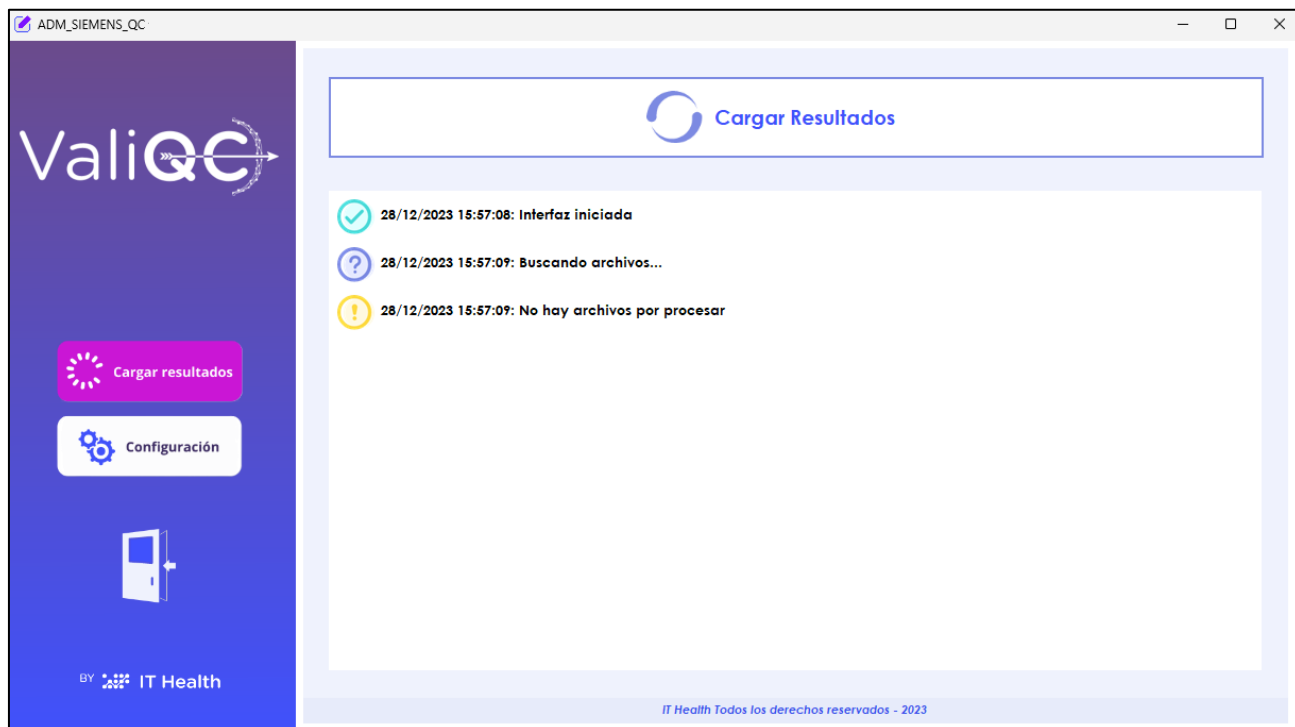



IT Health



- **Configuración:**

The screenshot shows a web application window titled 'ADM_SIEMENS_QC'. The left sidebar contains the 'ValiQC' logo, a 'Cargar resultados' button, a 'Configuración' button (highlighted), and a door icon. The main content area is titled 'Configuración' and has three tabs: 'Conexión', 'Parametrización', and 'Ruta'. The 'Conexión' tab is active and contains the following fields:

- Dirección IP: 190.60.122.167
- Puerto: 5432
- Nombre DB: VIVA1A
- Usuario: postgres
- Contraseña: qxrk26yp
- Intentos Reconexión: 1

At the bottom right of the configuration area is a 'Guardar' button. An illustration of a clipboard with a checklist and test tubes is also present. The footer of the window reads 'IT Health Todos los derechos reservados - 2023'.

- **Sección conexión:**
 - Dirección IP del servidor de ANNARLAB.
 - Puerto de conexión a PostgreSQL.
 - Nombre la Base de datos.
 - Usuario de conexión a PostgreSQL.
 - Contraseña del usuario de conexión a PostgreSQL.
 - Intentos de reconexión a la base de datos PostgreSQL.



IT Health



ANNAR
Health Technologies

The screenshot shows a web application window titled "ADM_SIEMENS_QC". On the left is a dark blue sidebar with the "ValiQC" logo, a "Cargar resultados" button, a "Configuración" button, and a door icon. The main area is titled "Configuración" and has three tabs: "Conexión", "Parametrización" (selected), and "Ruta". The "Parametrización" tab contains the following fields and controls:

- Nombre Equipo:
- Intervalo:
- Nombre Log:
- Activar Log: ☒
- ImprimirQueriesDBLog: ☐

On the right side of the configuration area is an illustration of a clipboard with a checklist, a blood drop, and test tubes, with a "Guardar" button below it. At the bottom of the window, it says "IT Health Todos los derechos reservados - 2023".

- **Sección parametrización:**

- Nombre del Equipo = Valor usado como cabecera de la homologación (equipo_cod)
- Intervalo = Tiempo en minutos en el que la interfaz realizara búsqueda de archivos planos en la ruta definida.
- Nombre log = Nombre que tomara el archivo log.
- Activar Log = Check para definir si la interfaz genera o no archivo log.
- ImprimirQueriesDBLog = Check para definir si la interfaz muestra en log todas las queries realizadas en los procesos de la interfaz.



IT Health



ANNAR
Health Technologies

The screenshot shows a web application window titled 'ADM_SIEMENS_QC'. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar is dark blue and contains the 'ValiQC' logo, a 'Cargar resultados' button with a circular arrow icon, a 'Configuración' button with a gear icon, and a door icon. The main content area has a light blue header with a 'Configuración' title and a circular arrow icon. Below the header, there are three tabs: 'Conexión', 'Parametrización', and 'Ruta'. The 'Ruta' tab is active and shows four text input fields for file paths: 'Ruta Log:' (C:\logs), 'Ruta Archivos:' (D:\Archivos), 'Ruta ArchivosOK:' (D:\ArchivosOK), and 'Ruta ArchivosERROR:' (D:\ArchivosERROR). To the right of these fields is an illustration of a clipboard with a checklist, a digital scale showing '85', and three test tubes. A 'Guardar' button is located below the illustration. At the bottom of the window, there is a footer that reads 'IT Health Todos los derechos reservados - 2023'.

- **Sección rutas:**

- Ruta Logs = Ruta del folder donde se almacenarán los Logs.
- Ruta Archivos = Ruta del folder donde se consultarán los archivos planos para su procesamiento.
- Ruta ArchivosOK = Ruta del folder donde se almacenarán los archivos una vez hayan sido procesados por la interfaz.
- Ruta ArchivosERROR = Ruta del folder donde se crearán archivos con las líneas que no se procesaron correctamente en los archivos planos.



IT Health




ANNAR

Health Technologies

9 Recomendaciones

Al iniciar la interfaz por primera vez se mostrará con un mensaje de error de procesamiento debido a que las rutas actuales están definidas con las que se trabajo el desarrollo.

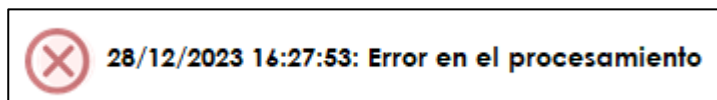

Una vez modificado con las rutas en las que se vaya a trabajar, el mensaje ya no se mostrara al inicio de la interfaz.